

Electronique de Puissance

Sondes de courants et tensions intégrées.





HACHEUR ONDULEUR MONOPHASE 150/300 W TBTS

CARACTERISTIQUES GENERALES

Les Packs EPS210B, C, et S de la gamme Génie Electrique incluent le pupitre EPS210000, guide technique, accessoires et en fonction de la version, le logiciel d'asservissement pour le PC et l'extension de simulation et création de nouveaux correcteurs pour la version S. Ils permettent l'étude :

Des hacheurs:

- ♦ Série
- ♦ Réversible en tension
- Réversible en courant
- ♦ Quatre quadrants
- ◆ Série double imbriqué (+E/0/–E)

Des onduleurs monophasés :

- Pleine onde à commande décalée, à fréquence variable
- ◆ M.L.I. +E/-E, +E/0/-E,
- ♦ U/F constant.

Commande externe:

 Par montage électronique +/-10 Vdc (en statique hacheur en modulé onduleur).

Il est livré par défaut avec le logiciel de paramétrage EPS210100, l'option EPS211000 afficheur couleur TFT 320x240 associé à un potentiomètre numérique permet

le fonctionnement en autonomie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

\$ 210 000

Caractéristiques nominales

- ◆ Tension d'alimentation admissible : 10 VDC à 48V DC (TBTS)
- ◆ Courant crête maximal dans chaque interrupteur statique : 10 A
- ♦ Fréquences de 1 Hz à 20 kHz
- ♦ Rampe d'accélération paramétrable
- ◆ Rapport cyclique variable entre 0% et 100%
- ♦ Temps mort réglable
- ♦ Mode commutation intersective ou vecteur d'état.

DOMAINES D'APPLICATION

Travaux Pratiques:

Formation fondamentale:

Secondaire et supérieur techniques.

- CPGE,
- BTS Electrotechnique,
- IUT GEII, GIM,
- Ingénieurs & Universités.

Illustration de cours :

L'EPS230 est aussi particulièrement bien adapté à l'illustration d'un phénomène particulier en cours magistral sur vidéoprojecteur (avec logiciel EPS210100 et PC).

SECURITES:

- ◆ Surveillance du courant d'excitation,
- ♦ Protection contre les courts circuits,
- ◆ PTO (protection thermique),
- ◆ Surveillance de l'alimentation : mini. 10 V ; maxi. 48V avant la mise en marche
- ◆ Contrôle du courant de charge de la capacité de filtrage à la mise sous tension
- ◆ Arrêt d'urgence si la tension du condensateur de réversibilité dépasse
- ◆ Surveillance du courant dans le transistor de décharge
- ◆ Surveillance de la tension du condensateur de réversibilité.

GUIDE TECHNIQUE:

Le pack **EPS210** est fourni avec son guide technique, procédure de mise en service et de diagnostic.

Sous tension d'alimentation maximale, protection électronique contre les surcharges.

COLISAGE:

 $\begin{array}{lll} Dimensions & \text{- nettes} : 330x265x110 \text{ mm} \\ (Lx \ lx \ h) & \text{- brutes} : 595x560x160 \text{ mm} \end{array}$


Poids: Net: 2 kg, Brut: 5 kg



EPS210000: Pupitre hacheur onduleur monophasé TBT 150/300W, Caractéristiques techniques:

Le pupitre EPS210000 est présenté en châssis isolant PVC avec face avant comportant des schémas synoptiques, l'appareil est à poser sur table. L'alimentation de puissance est externe (50 VDC max, 10A). La commande et choix des réglage se fait sur PC par le logiciel EPS210100.

Il est conçu pour être utilisé à partir d'une alimentation variable continue, conforme aux normes de sécurité en vigueur.

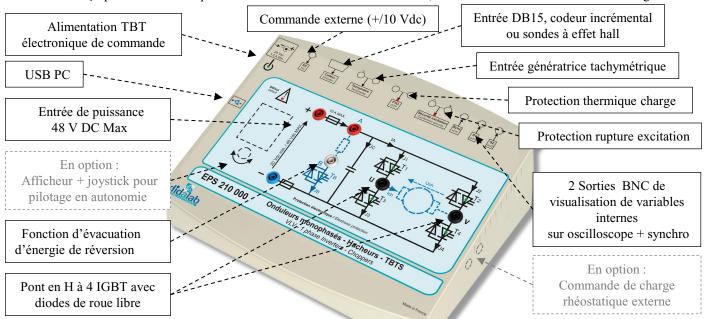

Le pupitre EPS210000 se connecte au PC par USB, il fonctionnel en autonomie avec l'option EPS211000. La carte de commande est basée sur un processeur de très haut niveau de puissance (ARM.M4), assisté d'un FPGA 50 000 portes. Le logiciel de commande sous Windows référence EPS210100, permet de choisir les montages :

- ➤ Hacheur série,
- > Hacheur réversible en courant, réversible en tension,
- > Hacheur 4 quadrants,
- \triangleright Série double imbriqué (0 +E 0 / 0 -E 0),
- > Onduleur monophasé à commande décalée, MLI, U/F constant,

Choisir les paramètres de fonctionnement (en fonction du montage étudié) :

- La fréquence de fonctionnement, le rapport cyclique,
- Le type et la fréquence de modulation BF (externe par BNC ou interne),


Choisir les signaux à visualiser sur oscilloscope par BNC ou sur PC :

- > Courant dans une des branches, courant dans la charge,
- > Tensions aux bornes d'une branche....

A tout moment le pupitre peut être relié (en fonction des options logiciel) à une connexion PC pour :


- > Visualiser les courbes temporelles tension courant sur PC,
- > Réaliser des Travaux Pratiques d'asservissement de vitesse et position sur moteur DC 120 à 300 W,
- > Créer des modèles de simulation et de nouveaux correcteurs temps réel à partir du logiciel de modélisation Scilab


ELD 037 480 : Banc de charge recommandé

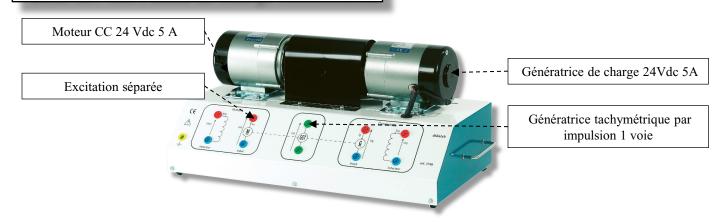

EPS210100: LOGICIEL DE PILOTAGE ET ACQUISITION


- > Il fonctionne sous environnement Windows et permet le pilotage du pont de puissance EPS210 par USB.
- L'étudiant choisit la structure de son pont,
- ►II choisit également les valeurs qu'il souhaite afficher sur l'oscilloscope interne,
- > Il règle ses paramètres de fonctionnement, fréquence, rapport cyclique, basse fréquence modulante pour l'onduleur ...

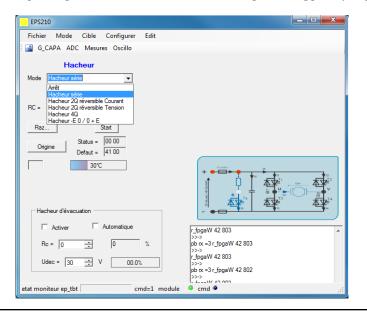

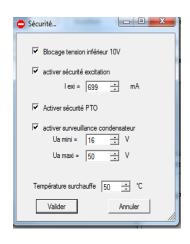

EPS210200: LOGICIEL DE CONTRÔLE COMMANDE « D_CCA »

- ➤ Il fonctionne sous environnement Windows et permet le pilotage du pont de puissance EPS210 par port USB.
- ➤ Utilisation, via une interface graphique ergonomique, configuration du système :
 - Choix de la structure du système : boucle ouverte / boucle fermée en vitesse ou en position,
 - Choix du type de commande, des valeurs caractéristiques : échelon constant, rampe, sinus, profil trapézoïdal,
 - Choix du correcteur et de ses réglages (P, PI, PID, correcteur en Z, logique floue, retour tachymétrique)
 - Choix des paramètres d'acquisition et d'enregistrement,
 - Choix des unités (degrés d'angle, radians, tours)
- Déroulement structuré d'une campagne d'essais expérimentaux :
 - Demande de la visualisation de la réponse temporelle d'une (ou plusieurs) grandeur(s) caractéristique(s) : position, vitesse, accélération, courant moteur, tension moteur, consigne, écart, sortie correcteur etc...
 - Modification des échelles du diagramme temporel (zoom en X, en Y)
 - Enregistrement de l'essai en cours, comparaison avec les essais précédents.
 - Mesure des valeurs caractéristiques d'automatique (constante de temps, temps de réponse à 5%, amplitude du dépassement, harmonique : rapport des valeurs moyennes et des amplitudes, déphasages etc...).

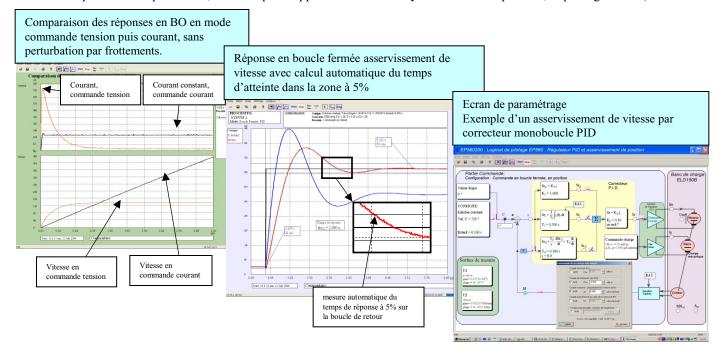


EPS210800 - Logiciel de prototypage rapide sur PC:


Afin d'accentuer les qualités pédagogiques, voire de recherche, du pupitre hacheur EPS210000, un module logiciel est proposé. Il peut synthétiser tout type de commande (commande BO, BF, PI, PID, retour d'état...) sous environnement Scilab®, puis générer le code exécutable qui sera téléchargé dans le hacheur/onduleur permettant ainsi son pilotage en temps réel. Cet outil graphique dispose de toute la puissance du logiciel de simulation Scilab®/Xcos; le rapprochement simulation vers le réel est donc accessible en TP, (asservissement de vitesse, position d'un moteur CC ..)


Exemple ci-dessous:

A partir d'une simulation en BO puis BF du système sous le module logiciel open source Scilab/Xcos®, le module D_Scil génère automatiquement le code qui sera transféré dans le pont hacheur onduleur puis testé sous le module logiciel D_CCA afin de comparer les résultats de simulation aux résultats d'expérimentation (cf : documentation D_Scil).

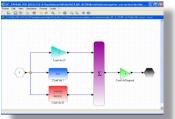



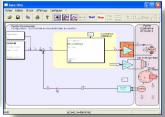

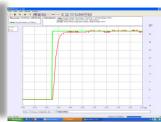

Correcteur PID édité sous Xcos

Code généré par D_Scil

Les configurations standards :

Implémentation dans D_CCA

Résultat temporel

EPS210B : Pack de base «ETUDE D'UN HACHEUR 1, 2, 4 quadrants, ONDULEUR monophasé 150/300W», incluant :			
Références	Désignations	Qtés	
EPS210000	Pupitre sécurisé d'électronique de puissance 300 W, Hacheur 1, 2, 4 quadrants, Onduleur monophasé pleine onde, MLI +/E, +/E0/-E, sondes de courant et de tension intégrées,	1	
EPS210100	Logiciel de pilotage et acquisition	1	
EGD000005	Alimentation 24 Vdc, 2.9 A avec prise Jack	1	
EPS2100010	Manuel d'utilisation et guide technique	1	
EGD000006	Cordon USB type AA	1	
EGD000018	Valise de rangement	1	

En option : EPS211000, Afficheur couleur TFT 320x240 et potentiomètre numérique pour commande en autonomie (sans PC).

EPS210C : Pack complet «ETUDE D'UN HACHEUR 1, 2, 4 quadrants, ONDULEUR monophasé 150/300 W, asservissement de vitesse & position sur moteurs DC» incluant :				
Références	Désignations	Qtés		
EPS210B	Pack de base «ETUDE D'UN HACHEUR 1, 2, 4 quadrants, ONDULEUR monophasé 300 W»,	1		
EPS210200	Module logiciel de pilotage d'asservissement de vitesse, acquisition des courbes de réponse sur PC (PC non inclus).	1		
EPS210040	Manuel professeur "Etude d'une régulation de vitesse et de position sur hacheur EPS210000"	1		
EPS210050	Manuel étudiant "Etude d'une régulation de vitesse et de position sur hacheur EPS210000"	1		

EPS210S : Pack Simulation et expérimentation «ETUDE D'UN HACHEUR 1, 2, 4 quadrants, ONDULEUR monophasé 150/300 W, asservissement de vitesse & position sur moteurs DC, création de nouvelles lois de commande» incluant :			
Références	Désignations	Qtés	
EPS210 C	Pack complet «ETUDE D'UN HACHEUR 1, 2, 4 quadrants, ONDULEUR monophasé 150/300 W, asservissement de vitesse & position sur moteur DC»	1	
EPS210800	D_Scil, prototypage rapide sous SCILAB/XCOS, éditeur à base d'objets graphiques, générateur de code C temps réel.	1	

Accessoires recommandés :

Alimentation 30V 6 A ou 50 V 6A

ELD037480: Banc de charge 120 W avec moteur CC à excitation séparée,

PMM064000: Rhéostat 320 W, 10 Ohms, 5,7 A, EPSD037340: Charge selfique 1, 2, 4, 6, 8 mH, 5A.

Accessoires: Cordons 4 mm double puits, appareils de mesure, PC,

Nota: pour les manipulations asservissement sur un autre banc, le groupe doit être équipé d'un codeur incrémental 5 Vdc.

